


LIFEPAK® 1000 Дефибриллятор





Не все экстренные кардиологические ситуации похожи одна на другую. Как и те, кто оказывает помощь. Мир требует гибкости - именно того, что обеспечивает предлагаемый компанией Physio-Control дефибриллятор LIFEPAK 1000.

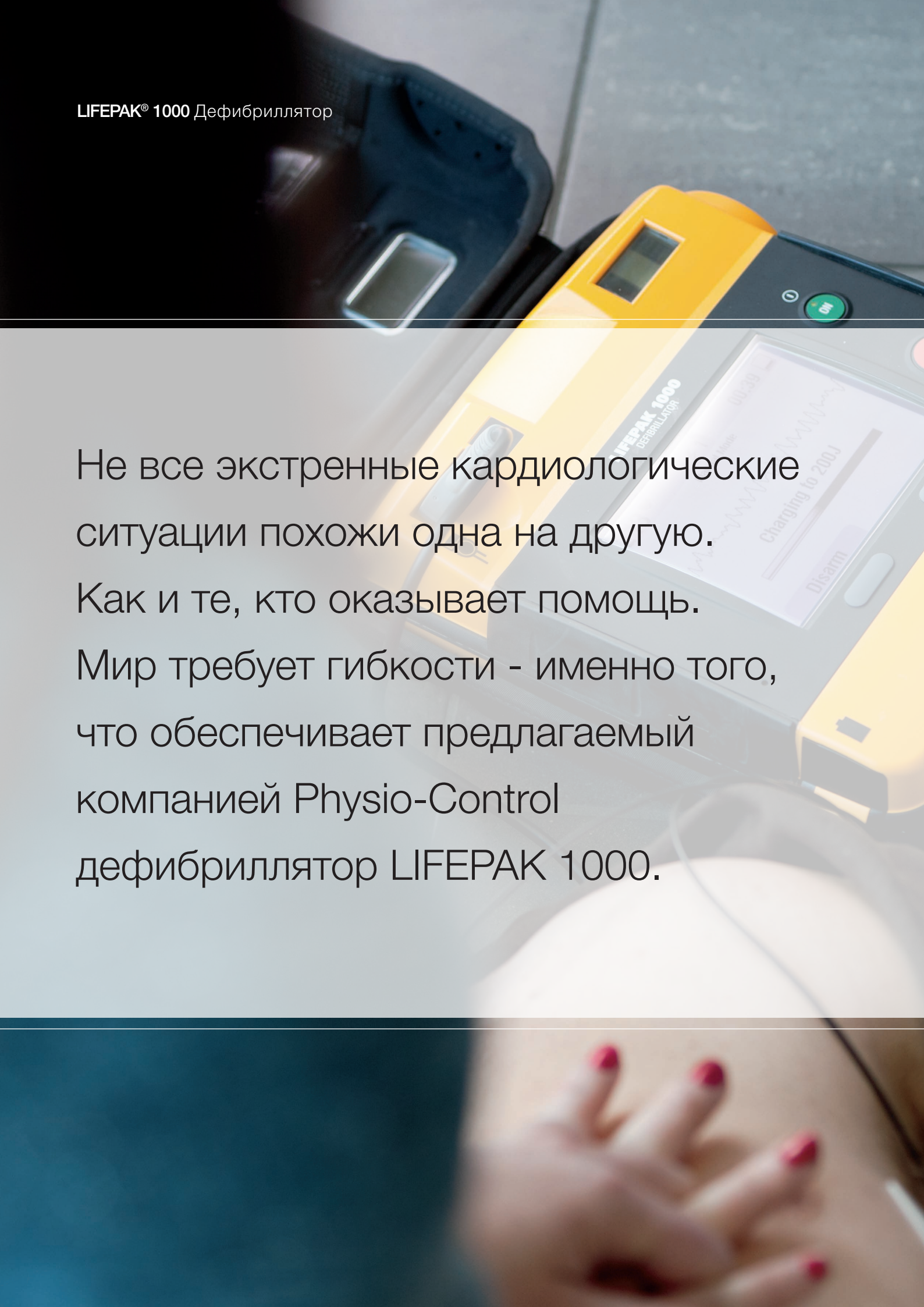

Нужный прибор в нужное время. Каждый раз.

Первый человек, оказывающий помощь на месте происшествия. Бригада базовой СЛР (БСЛР) на выезде или в приёмном покое больницы. Бригада расширенной СЛР (РСЛР), приступающая к действиям. Кем бы они ни были и в каких условиях им бы ни приходилось действовать, дефибриллятор LIFEPAK 1000 - это тот прибор, который им необходим.

Прочный дефибриллятор LIFEPAK 1000 является простым в использовании автоматическим наружным дефибриллятором (АНД), разработанным лидером в области технологий дефибрилляции. При этом дефибриллятор обладает достаточной мощностью и способностью адаптироваться к нуждам профессиональных медиков, предлагая передовые возможности, которые могут содействовать улучшению результативности мер по спасению жизни и ускорить перевод пациентов с внезапной остановкой сердца на следующий важный уровень медицинского обслуживания.

*Для пациентов с внезапной остановкой сердца
появление LIFEPAK 1000 на месте происшествия
на ранней стадии может быть вопросом жизни
или смерти.*

Для каждого обученного человека - это ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ.

Представьте себе приёмный покой больницы или коридор кафетерия. А теперь представьте себе, что у посетителя, пациента или сотрудника произошла внезапная остановка сердца. Кто окажет первую помощь? Это может быть обученный РСЛР член специализированной бригады, но с таким же успехом это может быть и медсестра или секретарь приёмной, обученные использованию 1000. Дефибриллятор LIFEPAK 1000 готов к любой такой ситуации, сочетая в себе простоту процесса дефибрилляции одним нажатием кнопки с чётким руководством как посредством изображений на экране, так и посредством звуковых подсказок.

Когда в дело вступает обученный РСЛР профессионал - в качестве оказывающего первую помощь или при перевозке пациента для оказания расширенного ухода - модель 1000 одним нажатием кнопки переводится на ручное управление и обеспечивает более тесный контроль над процессами анализа и нанесения электрошока. Предусмотренные в приборе функции ЭКГ предоставляют вам важную и

информацию, позволяющую действовать по протоколу и быстрее добиваться результата, при этом модель 1000 сохраняет важнейшие данные для анализа после события.

Находясь на борту патрульной полицейской или пожарной машины, модель 1000 с её гибкостью ещё более упрощает дело. Лица, обученные БСЛР, получают именно тот прибор, который им необходим, предлагающий мощную - до 360 джоулей - дефибрилляцию, долгий срок службы аккумулятора, а также прочную конструкцию, выдерживающую суровые условия эксплуатации. А имея в распоряжении технологию *capMAX™*, руководители служб БСЛР могут изменять настройки модели 1000 для соответствия протоколам своих бригад по оказанию СЛР.

При передаче пациента в руки специализированной бригады в больнице или бригады РЛСР по оказанию экстренной помощи (EMS) совместимость модели 1000 с другими устройствами *Physio-Control* может ускорить процесс, позволяя оставить электроды на пациенте в момент быстрого и бесперебойного переключения на более современный монитор.

Дефибриллятор LIFEPAK 1000 и программное обеспечение для просмотра данных CODE-STAT 9.0

С помощью программного обеспечения для просмотра данных CODE-STAT 9.0 легко просматриваются, анализируются и управляются данные пациента и рабочие характеристики, сохраняемые в модели 1000. Эта информация может пригодиться при дальнейшем уходе, давая медработникам возможность анализировать эффективность работы и намечать области обучения.



Краткий обзор монитора/ дефибриллятора LIFEPAK 1000.

Прочность конструкции

Прибор прошёл жёсткие ударные испытания и оснащён защитным корпусом и демпферами.

Возможность перевозки на автомобиле

Конструкция прибора позволяет перевозить его в любом автомобиле, не вызывая повреждений от постоянной вибрации и других движений.

Разные варианты электропитания

В вашем приборе может устанавливаться перезаряжаемый литий-ионный (Li-ion) или неперезаряжаемый литий-пиролузитовый (Li MnO₂) аккумулятор.

360 джоулей

Возможность увеличивать мощность дефибрилляции до максимального в отрасли значения 360 джоулей.

Технология **sprMAX™**

Минимизирует прерывания при проведении СЛР, позволяя продолжать компрессии во время зарядки АНД.

Таймер обратного отсчёта при СЛР

Информирует о продолжительности работы руками во время каждого периода СЛР, основываясь на протоколе системы.

Функция ЭКГ

При необходимости может использоваться функция 3-канальной ЭКГ.

Счётчик электрошоков

Цифровая регистрация и отображение количества нанесённых электрошоков для дополнительной информации.

Большой экран

Большой и лёгкий в использовании жидкокристаллический дисплей предоставляет больше информации с первого взгляда.

Совместимость технологии

Электроды полностью совместимы со всеми другими дефибрилляторами и мониторами LIFEPAK.

Возможность программирования

Возможность изменения настроек для соответствия протоколам вашей бригады по СЛР и восстановлению жизненных функций.

Лёгкий в использовании АНД

Громкие голосовые подсказки и графические изображения на экране обеспечивают руководство при установке электродов и нанесении электрошока.



Технология сprMAX

В модели 1000 используется наша эксклюзивная технология сprMAX, обеспечивающая возможность выбирать среди установок СЛР те, которые оптимально соответствуют данным пациента и требованиям протокола СЛР. Функция пре-шок СЛР позволяет регулировать интервал СЛР до нанесения первого электрошока; таким образом, модель 1000 - это единственный прибор, сводящий к минимуму паузы до нанесения первого электрошока и позволяющий продолжать компрессии в то время, пока АНД заряжается.

Недавно опубликованные клинические данные показывают связь между увеличением доли компрессий и выживанием вплоть до выписки из больницы, а в рекомендациях ААК 2010 г. особо подчёркивается важность качественного проведения СЛР.¹ Располагая прибором LIFEPAK 1000, вы обладаете более жёстким контролем над проводимой СЛР для спасения жизни пациента, чем когда-либо раньше.

LIFEPAK TOUGH™

Предназначенный для работы в самых суровых условиях, LIFEPAK 1000 является наиболее прочным и надёжным АНД компании Physio-Control. Прибор сам по себе выдерживает жёсткие испытания на удары с любого угла, при этом он заключен в надёжный защитный корпус, оснащённый демпферами. Кроме того, модель 1000 получила рейтинг IP55 - самый высокий рейтинг для АНД, свидетельствующий о защищённости прибора от внешних воздействий.

360 джоулей

Как любой другой дефибриллятор LIFEPAK компании Physio-Control, модель 1000 способна увеличивать мощность электрошока до 360 джоулей. Исследования показывают, что при работе с пациентами, трудно поддающимися дефибрилляции, коэффициент прекращения ВФ при повторении электрошоков мощностью 200 джоулей значительно ниже.^{2,3} А в рекомендациях ААК 2010 г. отмечается, что спасатели могут принять решение об увеличении мощности вплоть до 360 джоулей, если менее мощные дозы не приводят к нужному результату.⁴

Передача специалистам по РСЛР

LIFEPAK 1000 прост для использования любым обученным лицом и при этом предлагает лёгкость и высокую совместимость при передаче пациента бригадам по проведению РСЛР. Предусмотренный в модели 1000 счётчик электрошоков предоставляет специалистам бригад информацию о проведённых мероприятиях. Прибор имеет функцию 3-канальной ЭКГ. Кроме того, в нём используются те же электроды, которые применяются на мониторах для проведения РСЛР марки LIFEPAK - бренда, который выбирают многие бригады неотложной помощи (СМП) в стране

Средства обучения для подготовки по оказанию помощи.

Независимо от того, выбираете ли вы модель 1000 впервые или добавляете новые функции, представитель компании Physio-Control проведёт с вами вступительное занятие, необходимое для того, чтобы вы могли максимально использовать возможности дефибриллятора LIFEPAK 1000. Кроме того, предлагаются дополнительные варианты обучения.

Trainer 1000

Не используя реальную энергию, тренажёр Trainer 1000 создаёт при обучении реалистическую обстановку, поскольку передаёт такие же сообщения на экране, звуковые сигналы и голосовые подсказки, как те, которые предусмотрены в модели 1000. С помощью моделирования он помогает пользователям обучиться анализу, использованию энергии и соблюдению интервалов СЛР с подсказками - и при этом не возникает необходимости изымать из эксплуатации дефибриллятор LIFEPAK 1000 для практического обучения. Включает имитацию технологии сptMAX.

Пакет моделирующих учебных программ

Для использования с дефибриллятором LIFEPAK 1000 этот пакет, предлагаемый по доступной цене, включает имитацию пациента, запасной аккумулятор и учебные электроды. Не приобретая отдельное обучающее устройство, оказывающие помощь лица могут оттачивать свои навыки обращения с АНД, практиковаться в распознавании и реагировании на различные ритмы ЭКГ и узнавать о современных возможностях, предлагаемых моделью 1000, таких как переключение с режима мониторинга ЭКГ на ручной режим без отключения прибора.

AED Challenge

AED Challenge® - интерактивное онлайн-средство повышения квалификации при обращении с автоматическими наружными дефибрилляторами LIFEPAK - позволяет вам поддерживать навыки работы с АНД и проведения СРЛ в любое время и любом месте по вашему выбору. Сценарии, основанные на реальных событиях, обеспечивают вам постоянную практику и прямую обратную связь, при этом администраторы могут корректировать и отслеживать обучение с помощью прилагаемых средств управления обучением. Соответствие рекомендациям AAK 2010 г.

Серьёзное отношение к обслуживанию

Располагая крупнейшей сетью служб технической поддержки, представители которых проходят лучшую в отрасли подготовку, компания Physio-Control с гордостью представляет пользователям LIFEPAK 1000 лучшее в данной категории техническое обслуживание их приборов. Наши агенты в Северной Америке находятся на связи 24 часа в день, 7 дней в неделю, стараются перезвонить в ответ на каждый звонок в течение двух часов, вместе с вами быстро определить вашу конкретную проблему и найти лучшее решение. Кроме того, для решения проблемы по телефону можно прибегнуть к помощи нашего центра технического обслуживания в Редмонде, штат Вашингтон.

Соответствие вашим потребностям

Универсальный дефибриллятор LIFEPAK 1000 компании Physio-Control - это ваш шанс дать людям, оказывающим первую помощь, именно то спасательное средство, которое им необходимо - а специалистам, проводящим расширенную реанимацию, предоставить информацию и возможности для того, чтобы изменить конечный результат для пациентов.

Для получения дальнейшей информации обращайтесь к местному торговому представителю Physio-Control или звоните по телефону +7 (495) 745 36 89

Больницы

Дефибриллятор ЛІФЕРАК 1000 может быть важной частью комплексного решения в области АНД для вашего учреждения. Свяжитесь с нами, чтобы бесплатно пройти больничную оценку «Сердце в безопасности» (Heart Safe Hospital Assessment) и узнать о том, как именно модель 1000 может быть частью комплексного решения в области АНД для вашего учреждения. Мы проанализируем вашу нынешнее оборудование и практику реанимации и порекомендуем действия по приведению ваших действий в случаях остановки сердца в соответствие с новейшими инструкциями и клиническими данными - включая ААК.

Семейство продуктов Physio-Control

Дефибрилляторы/мониторы



Автоматический наружный дефибриллятор LIFEPAK CR® Plus

Автоматический наружный дефибриллятор LIFEPAK CR Plus AED разработан с использованием той же современной технологии дефибрилляции, на которую полагаются специалисты неотложной медицинской помощи; простота в эксплуатации рассчитана на то, что дефибриллятор сможет применить первый человек, которому придется оказывать экстренную помощь при внезапной остановке сердца.



Монитор/дефибриллятор LIFEPAK® 15

Монитор/дефибриллятор LIFEPAK 15 является эталоном в области неотложной помощи для специализированных реанимационных бригад, которые хотят использовать самое клинически инновационное, эффективное в использовании и прочное устройство, имеющееся на рынке - такое, как LIFEPAK TOUGH™. В основе Модели 15 лежат продвинутое клинические технологии, обеспечивающие широкие функциональные возможности, в том числе максимально возможную энергию разряда (вплоть до 360 Дж), расширенные возможности отображения показателей мониторинга и полностью модифицируемую платформу.



Дефибриллятор/монитор LIFEPAK® 20e с модулем CodeManagement Module®

Дефибриллятор/монитор LIFEPAK 20e высоко эффективен и имеет расширенный спектр возможностей; интерфейс интуитивно понятен тем, кому приходится оказывать экстренную помощь; устройство можно использовать в режиме автоматической наружной дефибрилляции и в ручном режиме, так что специалисты в области реанимационной кардиологии могут быстро и без затруднений оказывать специализированную лечебную помощь. С модулем CodeManagement вы получаете дополнительные функции капнографии и беспроводного соединения, которые позволяют увеличить эффективность при проведении процедур реанимации на всех этапах – от готовности до послепроцедурного анализа.

Помощь при проведении СЛР



Система компрессии грудной клетки LUCAS®

Chest Compression System разработанная для обеспечения эффективных, стабильных и бесперебойных компрессия в соответствии с Рекомендациями Американской кардиологической ассоциации, может быть использована для взрослых больных в больничных и внебольничных условиях.



Инструктирующее устройство TrueCPR™

Устройство TrueCPR поможет вашей бригаде оптимизировать эффективность ручной СЛР, предоставляя необходимую обратную связь по самым важным при реанимации параметрам как в реальном времени, так и после проведенной процедуры. Оно обеспечивает точное измерение глубины компрессии благодаря использованию разработанной фирмой технологии трехосной индукции магнитного поля (TFI).

Управление информацией



Система LIFENET®

Система LIFENET предоставляет бригадам неотложной помощи (СМП) доступ к клинической информации, используя безопасное решение на основе веб-технологий, которое способствует улучшению процесса лечения больных и повышению плавности и эффективности работы.

Программное обеспечение для просмотра данных CODE-STAT™

Программное обеспечение для просмотра данных CODE-STAT – это инструмент ретроспективного анализа, обеспечивающий простой доступ к данным, отчетам и анализу данных после реанимационной процедуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЕФИБРИЛЛЯТОР

Все характеристики приведены при 20°C, если не указано иного.

Форма кривой: Двухфазная усечённая экспоненциальная функция, с компенсацией напряжения и продолжительности импульса в связи с электрическим сопротивлением пациента*.

Последовательность энергии: Конфигурация по желанию пользователя, 150 - 360 джоулей. Установки выходной энергии по умолчанию - 200, 300, 360 джоулей. 360 джоулей при каждом последующем электрошоке.

Время зарядки: С новым неперезаряжаемым батарейным блоком; 200 джоулей в течение менее 7 секунд (360 джоулей в течение менее 12 секунд).

Функция 3-проводного (Lead II) мониторинга: (При приобретении варианта дисплея ЭКГ). Требуется приобретение 3-проводного (Lead II) кабеля для мониторинга и электродов LIFE-PATCH®.

Программное обеспечение прибора: Обновление на месте.

Электроды для фибрилляции с пониженной энергией для младенцев/детей: Снижает выбранную мощность в 4 раза. Предназначены только для детей в возрасте до 8 лет или весом 25 кг (55 фунтов).

Классификация безопасности: Оборудование IEC 60601-1 с внутренним источником питания.

Электрическая защита: Вход защищён от импульсов дефибриллятора высокого

напряжения в соответствии с IEC 60601-1-

*Стабилизация напряжения ограничивается напряжением, возникающим в результате выброса 360 джоулей при 50 ом.

УСТАНОВКИ ПРИБОРА

Режимы:

- **АНД** — Обеспечивает оперативную работоспособность обычным пользователям.
- **Ручной** — Обеспечивает оперативную работоспособность квалифицированным пользователям.
- **ЭКГ** — Предоставляет возможность отображения ЭКГ с помощью 3-проводного кабеля.
- **Настройка** — Позволяет пользователю изменять конфигурацию прибора.
- **Передача данных** — Позволяет пользователю передавать данные пациента.
- **Автотестирование** — Обеспечивает ежедневное автоматическое тестирование аппаратуры и программного обеспечения.

Органы управления: Вкл/Выкл, Электрошок, Меню, 2 (две) конфигурируемых функциональных клавиши.

Опции по выбору пользователя:

- **Опознавательный знак прибора** — назначает уникальный идентификатор конкретному прибору.
- **Мощность энергии** — изменяется пользователем от 150 до 360 джоулей.
- **Гибкость энергии** — увеличивается только после безуспешного применения более низкой мощности.
- **Автоанализ** — пользователь может настраивать прибор на автоанализ, автоанализ после первого электрошока или подсказку пользователю о нажатии кнопки анализа до начала каждого периода анализа.
- **Время СЛР** — (после нанесения электрошока или получения рекомендации о ненанесении электрошока) - настраивается пользователем - 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 секунд.
- **Дата/время прибора:**
- **Громкость голосовой подсказки** — позволяет пользователю изменять громкость динамика.
- **Дисплей ЭКГ** — (при приобретении данной опции) - включает и выключает дисплей для режима АНД.
- **Регистрация движения** — Вкл/Выкл по выбору пользователя (по умолчанию включена).
- **Предупреждение об обслуживании** — звуковой сигнал, подаваемый при необходимости обслуживания прибора. Конфигурируемое включение-выключение.
- **Ручной доступ** — (при приобретении опции дисплея ЭКГ) - прибор, в конфигурацию которого входит дисплей ЭКГ, может настраиваться и предоставлять пользователю возможность включать заряд и наносить электрошок без проведения анализа.
- **Установки технологии сrgMAX:**
- **Исходная СЛР** — Определяемое пользователем время проведения СЛР после первого анализа независимо от результатов анализа. Может устанавливаться в положения «Выкл.», 15, 30, 45, 60, 90, 120 и 180 секунд.
- **СЛР до нанесения электрошока** — позволяет проводить СЛР в то время, пока прибор заряжается. Может устанавливаться в положения «Выкл.», 15 или 30 секунд.
- **Пакетированный электрошок** — (Вкл./Выкл.) В положении «Выкл.» позволяет проводить СЛР после каждого электрошока.
- **Проверка пульса** — (Всегда, после каждой рекомендации о ненанесении электрошока (NSA), после второй NSA, никогда) Позволяет прибору давать подсказку о проведении проверки пульса либо после каждого электрошока, после каждой проверки пульса при получении NSA, либо никогда не подсказывать о проведении проверки пульса (положение по умолчанию - «Никогда»).

ЭКРАН

Жидкокристаллический дисплей с задней подсветкой, показывающий количество нанесённых электрошоков, прошедшее время, текст и графические изображения частоты сердечных сокращений и дополнительно - ЭКГ.

Размер: 120 мм (4,7 дюйма) x 89 мм (3,5 дюйма).

Частотная характеристика: 0,55 Гц - 21 Гц (-3 дБ), номинал

Вариант ЭКГ:

- **Скорость развёртки кривой** — 25 мм/сек для ЭКГ, номинал.
- **Время просмотра кривой** — минимум 4 секунды.
- **Амплитуда кривой** — 1 см/мВ, номинал.
- **Частота сердечных сокращений** — 20 - 300 уд./мин. цифровой дисплей, показывает знак «----», если частота сердечных сокращений составляет менее 20 уд./мин. При каждом обнаружении на ЭКГ зубцов QRS мигает символ сердца.

Информация ЭКГ поступает от электродов для взрослых и детей/младенцев, установленных в переднем-боковом и переднем-заднем положении. Для мониторинга ЭКГ может использоваться 3-проводная кабель (Lead II).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Температура работы в течение одно часа (время работы при температуре от комнатной до экстремальной): -20 - 60°C (-4 - +140°F).

Температура эксплуатации: 0° - 50°C (32° - 122°F).

Температура хранения: -30° - 60°C (-22° - 144°F) с аккумулятором и электродами (максимальное воздействие ограничено 7 днями).

Атмосферное давление: 575 гПа - 1060 гПа (от 4572 до -382 метров; от 15 000 до -1253 футов).

Относительная влажность: 5 - 95% (без образования конденсата).

Влагозащищённость: IP55 с аккумулятором и установленными электродами REDI-PAK™ (IEC 60529/EN 60529).

Столкновение: 15 g, 1000 столкновений (IEC 600-68-2-29).

Ударостойкость: 40 г пиковая, 15-23 мс, переходная частота 45 Гц.

Падение: Падение с высоты 1 метр на каждый угол, край и поверхность (MIL-STD-810F, 516.5, Процедура IV).

Вибрация: Произвольное тестирование на вибрацию - MIL-STD-810F, метод 514.5, категория 20; наземный транспорт 3.15 g скв. 1 час на ось.

Электромагнитные помехи:

- **Излучаемые** — IEC 60601-2-4, IEC60601-1-2, CISPR 11 класс В группа 1.
- **Устойчивость** — IEC 60601-2-4, IEC 60601-1-2; IEC 61000-4-2 (уровень 4), IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8.

РЕГИСТРАЦИЯ СОБЫТИЙ И СООБЩЕНИЕ О НИХ

Ёмкость памяти: Двойная система хранения данных пациентов. Минимум 40 минут ЭКГ текущего пациента. Краткая сводка данных предыдущего пациента.

Типы отчётов: Постоянная ЭКГ, краткая сводка (основные реанимационные события и связанные с ними кривые), журнал регистрации событий (отчёт о записях с привязкой по времени, отражающих действия оператора и прибора), журнал регистрации тестирования (отчёт о действиях по самотестированию).

Ёмкость: Минимум 100 маркеров событий с привязкой по времени.

Анализ и изучение данных: Система медицинской информатики CODE-STAT™ 6.1, Система управления информацией DT Express™ 2.1 или выше.

Информационное обеспечение: Инфракрасная беспроводная передача на персональный компьютер.

ДИСПЛЕЙ АККУМУЛЯТОРА И ГОТОВНОСТИ

Примечание: Информацию об уходе за аккумулятором см. в инструкции по эксплуатации.

Неперезаряжаемый аккумулятор:

- **Тип** — литий-пирролизитовый (Li/MnO₂), 12,0 В, 4,5 А/ч
- **Ёмкость** — обычно обеспечивает 440 электрошоков по 200 джоулей или 1030 минут времени работы с новым аккумулятором (370 электрошоков по 200 джоулей или 900 минут времени работы при 0°C (32°F)).
- **Масса** — 0,45 кг (1,0 фунтов)
- **Срок хранения** — (до установки) После хранения аккумулятора в течение 5 лет при 20° - 30°C прибор работает 48 месяцев в режиме пониженного энергопотребления.
- **Режим пониженного энергопотребления** — новый аккумулятор обеспечивает прибору питание в течение 5 лет.
- **Индикатор разрядки аккумулятора** — После первой индикации разрядки аккумулятора энергии останется на 30 электрошоков по 200 джоулей или 75 минут времени работы.

Перезаряжаемый аккумулятор:

- **Тип** — литий-ионный, 11,1 В, 4,8 А/ч, 53 Вт/ч
- **Ёмкость** — обычно обеспечивает 261 электрошок по 200 джоулей или 608 минут рабочего времени с новым полностью заряженным аккумулятором (247 электрошоков по 200 джоулей или 576 минут рабочего времени при 0°C (32°F)).
- **Время зарядки аккумулятора** — в пределах 4,5 часов
- **Масса** — 0,45 кг (1,0 фунтов) максимум
- **Режим пониженного энергопотребления** — новый полностью заряженный аккумулятор обеспечивает прибору питание в течение 6 месяцев.
- **Индикатор разрядки аккумулятора** — После первой индикации разрядки аккумулятора энергии останется по меньшей мере на 30 электрошоков по 200 джоулей или 75 минут времени работы.

Устройство зарядки аккумулятора:

- **Поддерживаемый аккумулятор** — литий-ионный перезаряжаемый аккумулятор, 11,1 В, 4,8 А/ч, 53 Вт/ч
- **Электрическая часть** — внешний источник питания: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- **Температура** — рабочая: 0°C - 40°C; хранения: -30°C - 70°C
- **Время зарядки** — в пределах 4,5 часов
- **Зарядка** — постоянный ток/постоянное напряжение в пределах температурных лимитов.
- **Длина** — 270 мм.
- **Ширина** — 97 мм.
- **Высота** — 92 мм.
- **Масса** — 0,5 кг

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота: 8,7 см (3,4 дюймов).

Ширина: 23,4 см (9,2 дюймов).

Толщина: 27,7 см (10,9 дюймов).

Масса: 3,2 кг (7,1 фунтов) с одним комплектом электродов REDI-PAK и одним неперезаряжаемым аккумулятором.

ССЫЛКИ

- 1 Christenson J, Andrusiek D, Everson-Stewart S, et al. Chest compression fraction determines survival in patients with out-of-hospital ventricular fibrillation. *Circulation*. 2009; 120:1241-1247.
 - 2 Stiell I, Walker R, Nesbitt L, et al. "The BIPHASIC Trial: a randomized comparison of fixed lower versus escalating higher energy levels for defibrillation in out-of-hospital cardiac arrest." *Circulation*. 2007; 115:1511-1517.
 - 3 Koster R, Walker R, Chapman F. Recurrent ventricular fibrillation during advanced life support care of patients with prehospital cardiac arrest. *Resuscitation*. 2008; 78:252-257.
 - 4 2010 American Heart Association guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiac care science. *Circulation* 2010.
- All claims valid as of June 2015.

Physio-Control теперь является частью Stryker.

Для получения дополнительной информации просим связаться с представителем Physio-Control в вашем регионе или посетить наш сайт: www.physio-control.com

Physio-Control Headquarters
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052 USA
Tel 425 867 4000
www.physio-control.com

**Physio-Control Operations
Netherlands B.V.** 
Herikerbergweg 110
1101 CM Amsterdam
Нидерланды
Телефон +31 (0)43 3620008
Факс +31 (0)43 3632001

**Physio-Control
UK Sales Ltd**
35 Great St Helen's
London EC3A 6AP
Великобритания

ООО "Физио-Контрол Сейлз"
Россия 115054 г. Москва
ул. Бахрушина, д. 32, стр. 1

Официальный дистрибьютор:
ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»
РФ, Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19
Тел.: 8 495 921 35 32
Бесплатный звонок:
8 800 333 35 32
mail@isen.ru
www.isen.ru